



## MANDRIL CA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO.

### MODELO DO PRODUTO:

MANDRIL CA  
MANDRIL CA MINI  
MANDRIL CA REFORÇADO  
MANDRIL CA POP ON  
MANDRIL CA ADAPTADOR FG

### COMPOSIÇÃO DO PRODUÇÃO:

LATÃO COM BANHO DE NÍQUEL  
CELERON

### DIMENSÕES:

#### MANDRIL CA

COMPRIMENTO: 18,6MM  $\pm$ 1  
DIÂMETRO: 2,3MM  $\pm$ 0,5  
DIÂMETRO DA CABEÇA DA PEÇA: 4,8MM  $\pm$ 0,5

#### MANDRIL CA MINI


COMPRIMENTO: 18,08MM  $\pm$ 1  
DIÂMETRO: 2,28MM  $\pm$ 0,5  
DIÂMETRO DA CABEÇA DA PEÇA: 3,22MM  $\pm$ 0,5

#### MANDRIL CA REFORÇADO

COMPRIMENTO: 24,78MM  $\pm$ 1  
DIÂMETRO: 2,25MM  $\pm$ 0,5  
DIÂMETRO DA CABEÇA DA PEÇA: 4,75MM  $\pm$ 0,5

#### MANDRIL CA POP ON

COMPRIMENTO: 21,17MM  $\pm$ 1  
DIÂMETRO: 2,27MM  $\pm$ 0,5  
DIÂMETRO DA CABEÇA DA PEÇA: 3,10MM  $\pm$ 0,5

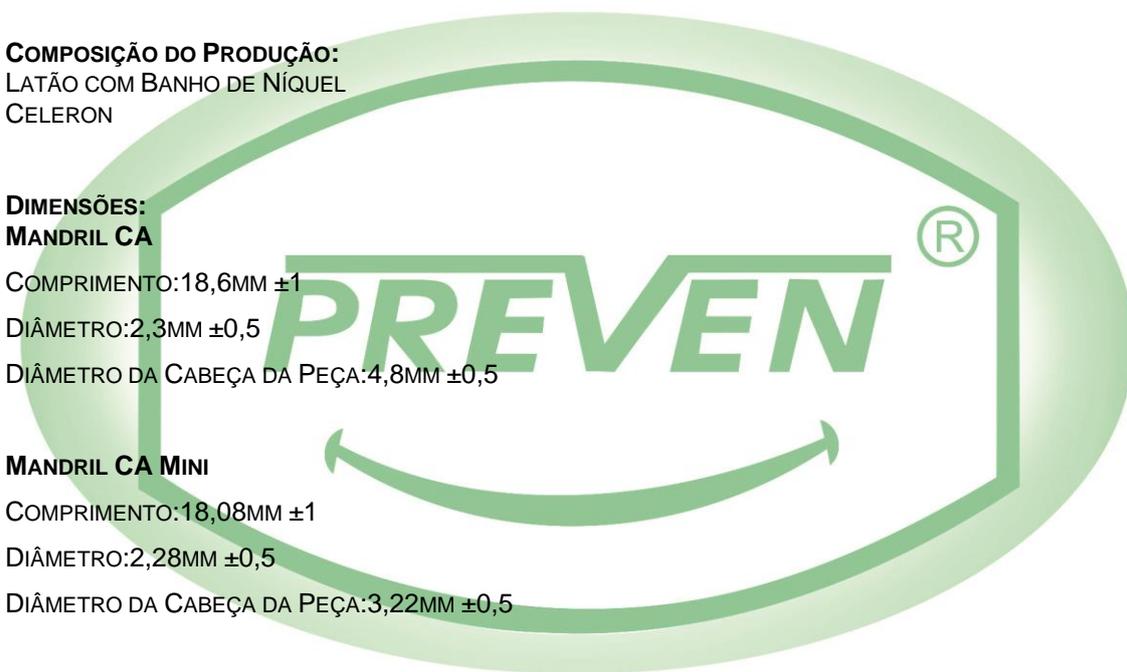



**MANDRIL CA ADAPTADOR FG**

COMPRIMENTO:14,44MM  $\pm$ 1

DIÂMETRO:2,17MM  $\pm$ 0,5

**INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:**

PRODUTO PARA ENCAIXE DOS DISCOS E SERRAS, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:**

NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVE À 121° POR 30 MINUTOS.

**ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:**

COLOCA-SE O DISCO OU SERRA NA EXTREMIDADE DO MANDRIL E ENCAIXA-O NO CONTRA ÂNGULO.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

**APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**

BLISTER COM 01 UNIDADE

BLISTER COM 100 UNIDADES

**REGISTRO DO PRODUTO:**

ANVISA: 800.896.29003

**PREVEN**®